

varimed®

ISO-vogner – til medisinsk bruk



Når kvalitet teller

Vår ekspertise for hverdagen
i enhver klinisk praksis

Antimikrobielt belegg
for optimal hygiene



| Februar 2024 | kat 131 |

CE

svas svalland as



Alle enheter merket med CE-MD-symbolet, i kombinasjon med vårt tilbehør, oppfyller kravene i Medical Device Regulation 2017/745/EU (MDR) så vel som Medical Device Amendment Act og er medisinsk utstyr i risikoklasse 1.



Alle enheter merket med det enkle CE-symbol-et oppfyller kravene i lavspenningsdirektivet 2014/35/EU samt forskriften om elektrisk utstyr.



Se også brukermanualen for mer informasjon om tiltenkt bruk!

Produsenten forbeholder seg retten til å endre design, konstruksjon, dimensjoner og utførelse av produktene uten nærmere varsel. Alle dimensjoner og vekter er oppgitt innenfor et relevant toleranseintervall. På grunn av tekniske årsaker kan mindre avvik i fargenyanser forekomme.

Innholdsfortegnelse

Lange tradisjoner	5
Maksimal kundetilfredshet	5
varimed® ISO-vogner	11
ISO-vogner, høyde 850 mm	15
ISO-vogner, høyde 1070 mm	19
ISO-vogner bordplate varianter	24
Tilbehør for funksjonsvogner og ISO-vogner	26
Moduler for ISO-vogner	34
Funksjons- og ISO-vogner / IT-løsninger	39
Tilbehør til IT-løsninger	46
Skuffer for ISO-moduler i full størrelse	51
Skuffer for halvstore ISO-moduler	51
Antimikrobiell belegg	53
Bestillingsinformasjon og materialbeskrivelse	54
Modell- og materialinformasjon	55
Fargekart Pulverlakkert finish	56
Fargekonfigurator Oppdag nye, fargerike verdener	57
Notater	58
Kontaktinformasjon	Se bakside



Lange tradisjoner

Med mer enn 90 års erfaring er SCHMITZ en av de ledende internasjonale produsentene av medisinsk utstyr.

En familieeid bedrift med en levende tradisjon. Vår typiske medarbeider har vært i selskapet i rundt 18 år, et bevis på hvor sterkt de identifiserer seg med våre verdier og filosofi.

I 2012 gikk selskapets ledelse over til Friedrich og Matthias SCHMITZ, den fjerde generasjonen av familien.

Vi er stolte av å være lokalisert i Tyskland og er dypt forankret i vår hjemregion. Vi utvikler og produserer her. 90 % av våre leverandører er fra Tyskland, hvorav 60 % er fra den lokale regionen.

Maksimal kundetilfredshet

Vår livsnerve er at vi har en inngående kjennskap til våre kunders behov, og har som mål å oppnå maksimal kundetilfredshet. Fra rådgivning via planlegging til installasjon.

Kostnadseffektive produkter med lang levetid er det du kan forvente av oss.

Med et gjennomtenkt servicekonsept og omfattende support jobber SCHMITZ sammen med deg som partner fra start til slutt.

“Lidenskap for kvalitet og urokkelig dedikasjon til detaljer – ekspert på alle områder”





varimed® ISO-vogner **Ekspertise på avdelingslogistikk**

SCHMITZs markedsledende ISO-vogner tilbyr den perfekte hjelpen for daglig klinisk praksis. Slitesterk og fleksibel – varimed® ISO-vogner brukes på nesten alle tyske klinikker.

Optimal organisering

Et tilpasset utvalg av alternativer sikrer at løsninger er perfekt skreddersydde til dine behov – en optimal organisering av arbeidsplassen din.

Høy fleksibilitet

Ulike høyder, ulike skuffekonfigurasjoner, full- eller halvstørrelse ISO-moduler – varimed® ISO-vogner tilpasset til dine daglige arbeidsprosesser.

Hygiene tatt et skritt videre

Avtakbare skuffepaneler og lukkede overflater muliggjør rask, fullstendig og enkel rengjøring – bedre hygiene med SCHMITZs oppgraderte rengjøringsstandard.

Perfekt hygienestandard

Nesten fullstendig eliminering av bakterier takket være antimikrobielle belegg – ingen sjanse for multiresistente patogener.

Like individuelle som dine krav

Vårt farge- og konfigurasjonskonsept garanterer ideelt individuelt tilpassede designalternativer for klinikken din.







varimed® ISO-vogner

Veggbeskyttende hjul beskytter vognene, møblene og veggene mot skader

Lukkede doble lettrullbare kulelagerhjul, berøringsfri merking og slitasjefri kvalitet. Lettmanøvrerte, lydløse ISO-vogner.

Sideskinner (202.0016.0)

for enkel montering av tilbehør.

Skjulte skuffeglidere og full uttrekksfunksjon for optimal hygiene

Skuffer med automatisk inntrekkfunksjon og Airmatic støtdempersystem. Enkel å fjerne fronten gjør rengjøringen enkel

Ergonomisk skyvehåndtak i to modeller

- Rett skyvehåndtak (som vist til venstre)
- Buet modell

Skyvehåndtaket kan monteres på høyre eller venstre side eller kan leveres uten.

Bakterier har ingen sjanse

Vårt spesielle antimikrobielle belegg bekjemper alle lokale bakterier effektivt, og etterlater dem ikke noe sted å spre seg. For mer informasjon om antimikrobiell belegg, se side 50 og 51.

Silikonforsegling på dører, desinfeksjonssikker

Åpningsvinkel på dørene maks. 125°.

ISO skinnevegger

tillater enkel og fleksibel innsetting av SCHMITZ ISO-moduler.



varimed® ISO-vogner

Praktisk design

Skuffene kan utstyres med én ISO-modul i full størrelse eller to halvstore ISO-moduler (se skuffeinnsatser på bilde til venstre)

ISO-vognmodeller med en høyde på 850 mm eller 1070 mm, skreddersydd til dine behov

For uovertruffen fleksibilitet: ISO-vogner 850 mm høyde kan utstyres med opptil 8 full-størrelse eller 16 halv-størrelse ISO-moduler; ISO-vogner 1 070 mm høyde kan utstyres med opptil 11 i full størrelse eller 22 i halv størrelse ISO-moduler.

En oversikt over skuffelayoutalternativene for ISO-moduler i full og halv størrelse finner du på }49.

Enkel utskifting av moduler

for rask rekonfigurasjon av ISO-vogner. Modulene kan tas rett ut uten å vippe eller helle.

Alle ISO-modulskuffer har innfelte grep,

gjør det mye enklere å ta ut og sette inn modulene.

Ta sikkerheten enda lenger!

Innovativ låsedesign med toppmoderne teknologi.



varimed® ISO-vogner, høyde 850 mm

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------



260.0025.0	ISO-vogn med 4 stk skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, kulelager, hvorav 2 elektrisk ledende, 2 fullt låsebare hjul, og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med roterende veggavvisere, plast-topp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
-------------------	---

Moduler er ikke inkludert.



260.0026.0	ISO-vogn som ISO-vogn 260.0025.0, men med 2x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 1x skuff for moduler på maks. 200 mm høyde.
-------------------	--

Moduler er ikke inkludert.



260.0027.0	ISO-vogn som ISO-vogn 260.0025.0, men med 2x skuffer for moduler på maks. 50 mm høyde, samt 3x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde.
-------------------	---

Moduler er ikke inkludert.




varimed®

ISO-vogner, høyde 850 mm

Modell nr.	Beskrivelse
	260.0028.0 ISO-vogn som ISO-vogn 260.0025.0, men med 2x skuffer for moduler på maks. 50 mm høyde, 1x skuff for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 1x skuff for moduler på maks. 200 mm høyde. Moduler er ikke inkludert.
	260.0029.0 ISO-vogn som ISO-vogn 260.0025.0, men med 2x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 4x skuffer for halvmoduler på maks. 100 mm høyde. Moduler er ikke inkludert.
	260.0030.0 ISO-vogn som ISO-vogn 260.0025.0, men med 2x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 2x skuffer for halvmoduler på maks. 200 mm høyde. Moduler er ikke inkludert.
	260.0038.0 ISO-vogn som ISO-vogn 260.0025.0, men med 2 hengslede dører. Forberedt for montering av ABS-skinnevegger for ISO-moduler i full størrelse (f.eks. modellnr. 202.0082.0 fra SCHMITZ eller de fra en annen produsent). Vi anbefaler bruk av stoppere 202.0072.0 (par) for ISO-moduler i full størrelse som tilbehør. Moduler er ikke inkludert.

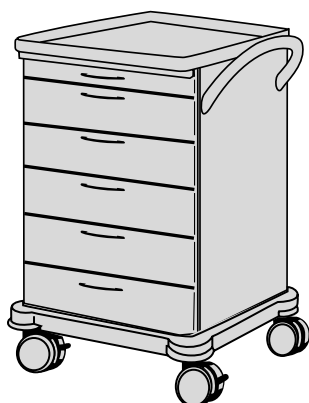


varimed®
ISO-vogner, høyde 1070 mm

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

ISO-vogn	260.0031.0
-----------------	-------------------

med 1x skuff for moduler på maks. 50 mm høyde, samt 5x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, kulelager, hvorav 2 elektrisk ledende, 2 fullt låsbare hjul, og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med roterende, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.

Moduler er ikke inkludert.

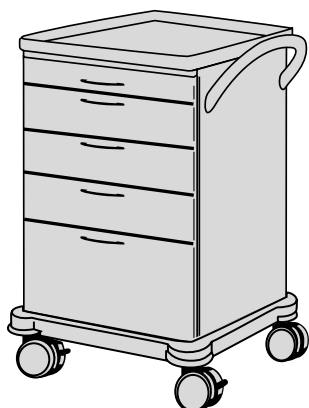

260.0032.0	ISO-vogn
-------------------	-----------------

som ISO-vogn 260.0031.0, men med 1x skuff for moduler på maks. 50 mm høyde, 3x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 1x skuff for moduler på maks. 200 mm høyde.

Moduler er ikke inkludert.



260.0033.0	ISO-vogn
-------------------	-----------------

som ISO-vogn 260.0031.0, men med 3 stk skuffer for moduler på maks. 50 mm høyde, og 4x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde.

Moduler er ikke inkludert.


varimed®
ISO-vogner, høyde 1070 mm



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------



260.0034.0	ISO-vogn som ISO-vogn 260.0031.0, men med 3x skuffer for moduler på maks. 50 mm høyde, 2x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 1x skuff for moduler på maks. 200 mm høyde.
-------------------	---

Moduler er ikke inkludert.

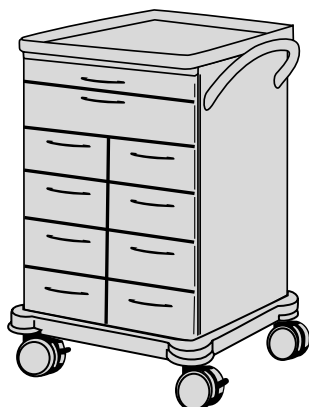

260.0035.0	ISO-vogn som ISO-vogn 260.0031.0, men med 1x skuff for moduler på maks. 50 mm høyde, 1x skuff for moduler på maks. 100 mm høyde, samt 8x skuffer for halvmoduler på maks. 100 mm høyde.
-------------------	---

Moduler er ikke inkludert.

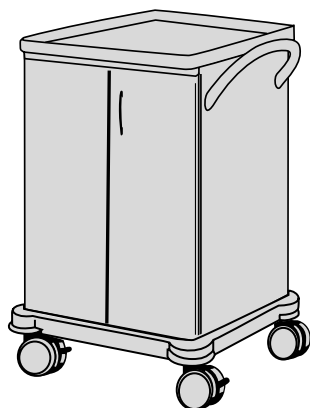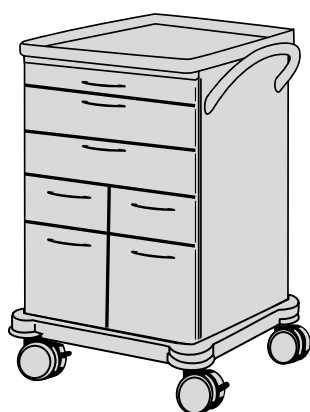

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

260.0036.0	ISO-vogn
-------------------	-----------------

	som ISO-vogn 260.0031.0, men med 1x skuff for moduler på maks. 50 mm høyde, 2x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, 2x skuffer for halvmoduler på maks. 100 mm høyde, samt 2x skuffer for halvmoduler på maks. 200 mm høyde.
--	--


	Moduler er ikke inkludert.
--	-----------------------------------

260.0037.0	ISO-vogn
-------------------	-----------------

	som ISO-vogn 260.0031.0, men med 2 hengslede dører. Forberedt for montering av ABS skinnevegger for ISO-moduler i full størrelse (f.eks. modellnr. 202.0082.0 fra SCHMITZ eller de fra en annen produsent). Vi anbefaler bruk av stoppere 202.0072.0 (par) for ISO-moduler i full størrelse som tilbehør.
--	---

	Moduler er ikke inkludert.
--	-----------------------------------


varimed®
ISO-vogner, høyde 1070 mm

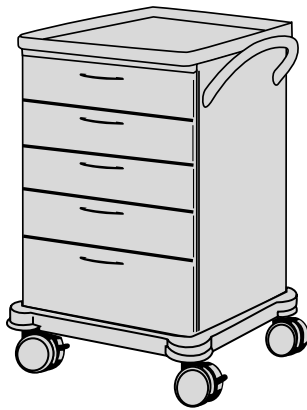

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------


260.0050.0	ISO-vogn som ISO-vogn 260.0031.0, men med 5x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, nedre skuff med hevet frontpanel.
-------------------	---

Moduler er ikke inkludert.

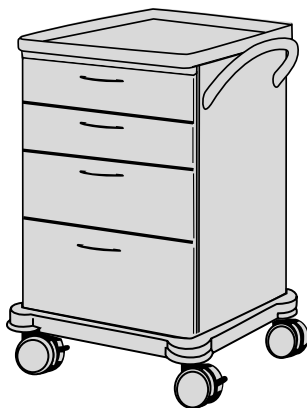

260.0051.0	ISO-vogn som ISO-vogn 260.0031.0, 3x skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde, hvorav tredje skuff med hevet frontpanel, samt 1x skuff for moduler på maks. 200 mm høyde.
-------------------	--

Moduler er ikke inkludert.

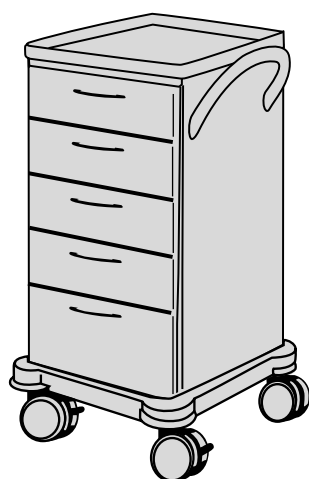


Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

260.0052.0	ISO-vogn
-------------------	-----------------

	som ISO-vogn 260.0031.0, men 360 mm chassis bredde, med 5x skuffer for halvmoduler på maks. 100 mm høyde, nedre skuff med hevet frontpanel.
--	---

Moduler er ikke inkludert.

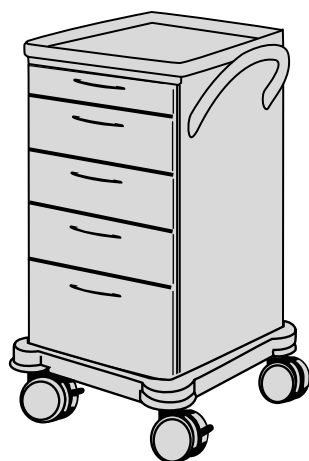


260.0039.0	ISO-vogn
-------------------	-----------------



	som ISO-vogn 260.0031.0, men 360 mm chassis bredde, med 1x skuff for halvmoduler på maks. 50 mm høyde, 3x skuffer for halvmoduler på maks. 100 mm høyde, samt 1x skuff for halvmoduler på maks. 200 mm høyde.
--	---


Moduler er ikke inkludert.

varimed® ISO-vogner bordplate varianter

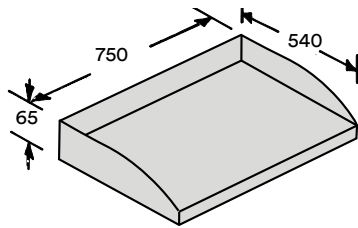


Modell nr.	Beskrivelse
202.0033.0	Bordtopp av plast, sølvgrå, med 3-sidig gallerikant, for ISO-vogner med 720 mm bredde. Tilleggspris
202.0042.0	Bordtopp laget av plast, sølvgrå, med 3-sidig gallerikant, for ISO-vogner med 360 mm bredde. Tilleggspris
202.0034.0	Bordtopp SST 18/10, for ISO-vogner med 720 mm bredde.

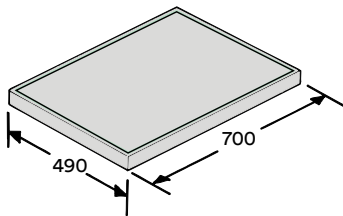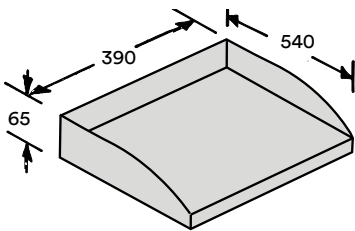


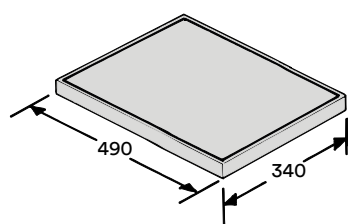

Modell nr.	Beskrivelse
202.0045.0	Bordtopp SST 18/10, for ISO-vogner med 360 mm bredde.

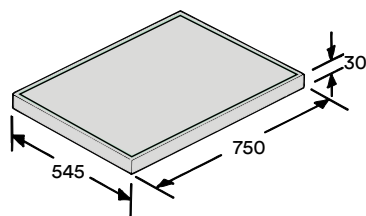

202.0035.0	Bordtopp laget av SST 18/10 med hele profilkanten, for ISO-vogner med 720 mm bredde. Tilleggspris
-------------------	--

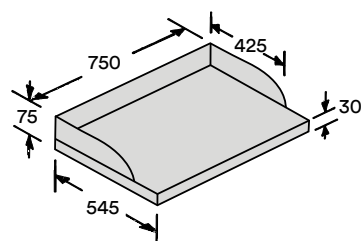

202.0036.0	Bordtopp laget av SST 18/10 med 3-sidig rekkverk, for ISO-vogner med 720 mm bredde. Tilleggspris
-------------------	---

varimed®

Tilbehør for funksjonsvogner og ISO-vogner

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.7560.1	
-------------------	--

	Sentrallås
--	-------------------

	for skuffer (inkludert to skuffer ved siden av hverandre), ikke egnet for modeller med hengslede dører eller åpne rom.
--	--

	Kan brukes til å låse alle skuffer eller individuelle skuffer, spesifiser ved bestilling. Samme nøkkel betjener flere funksjonsvogner eller ISO-vogner som standard. Ingen ettermontering mulig.
--	--

	Skuffer for halvmoduler med 50 mm høyde kan ikke låses!
--	--



202.0037.0	
-------------------	--

	Elektronisk lås (PIN)
--	------------------------------

	For åpning og lukking av alle skuffer i ISO- eller funksjonsvogner ved å taste inn en PIN-kode på det eksternt monterte tastaturet; installasjon kun på høyre side. Strømforsyning via utskiftbare AA-batterier installert i vognen.
--	--

	Kan brukes til å låse alle skuffer eller individuelle skuffer, spesifiser ved bestilling. Ingen ettermontering mulig.
--	---

	Kan ikke monteres i ISO-vogner med 360 mm bredde. Skuffer for halvmoduler på 50 mm høyde kan ikke låses!
--	--





Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.0038.0	Elektronisk lås (RFID – MIFARE)
-------------------	--

For åpning og lukking av alle skuffer i ISO- eller funksjonsvogner med leser for brukerkort eller nøkkelbrikker. Datautveksling via MIFARE-kryptering. Leseren er utvendig montert på vognens høyre side.

Strømforsyning via utskiftbare AA-batterier installert i vognen. Kan brukes til å låse alle skuffer eller individuelle skuffer, spesifiser ved bestilling. Ingen ettermontering mulig.

Kan ikke monteres i ISO-vogner med 360 mm bredde.

Skuffer for halvmoduler med 50 mm høyde kan ikke låses!

Kan kun brukes med kortsett 202.0065.0 og brukerkort 202.0057 eller RFID nøkkelbrikke 202.0058.0.

202.0073.0	Elektronisk lås (RFID – LEGIC)
-------------------	---------------------------------------

For åpning og lukking av alle skuffer i ISO- eller funksjonsvogner med leser for brukerkort eller nøkkelbrikke. Datautveksling via LEGIC-kryptering. Leseren er utvendig montert på vognens høyre side.

Strømforsyning via utskiftbare AA-batterier installert i vognen. Kan brukes til å låse alle skuffer eller individuelle skuffer, spesifiser ved bestilling. Ingen ettermontering mulig.

Kan ikke monteres i ISO-vogner med 360 mm bredde.

Skuffer for halvmoduler med 50 mm høyde kan ikke låses!

Kan kun brukes med kortsett 202.0065.0 og brukerkort 202.0057 eller RFID nøkkelbrikke 202.0058.0.

(uten bilde.)

 Viktig!

*Brukerkort eller nøkkelbrikke er ikke inkludert; vennligst bestill separat!
Hvis du allerede bruker RFID-transpondere fra en annen produsent,
vennligst sjekk på forhånd om de er kompatible med våre systemer, eller
kontakt oss.*

varimed® Tilbehør for funksjonsvogner og ISO-vogner

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.0057.0	Brukerkort
-------------------	-------------------

Ett brukerkort for åpning og lukking av ISO- og funksjonsvogner i kombinasjon med elektronisk RFID-lås 202.0038.0 eller 202.0073.0.



202.0058.0	RFID nøkkelbrikke
-------------------	--------------------------

En nøkkelbrikke for åpning og lukking av ISO- og funksjonsvogner i kombinasjon med elektronisk RFID-lås 202.0038.0 eller 202.0073.0.





Modell nr. Beskrivelse

202.0065.0 Sett inkludert hovedkort, oppdateringskort, servicenøkkel

Ett kortsett bestående av ett hovedkort, oppdateringskort og servicenøkkel. Nødvendig for å installere og sette opp elektroniske RFID-låser 202.0038.0 og 202.0073.0.

Hvis den elektriske låsen 202.0038.0 eller 202.0073.0 monteres på flere vogner i én bestilling, da er 1 stk. kortsett 202.0065.0 er tilstrekkelig.



202.0069.0 Sett med programmeringskort

Valgfri; for bruk av ulike driftsmoduser med elektroniske RFID-lås 202.0038.0 og 202.0073.0, for eksempel for å aktivere og deaktivere akustiske signaler eller for å tilbakestille låsene til fabrikkinnstillingene.

Hvis den elektriske låsen 202.0038.0 eller 202.0073.0 monteres på flere vogner i én bestilling, da er 1 stk. kortsett 202.0069.0 er tilstrekkelig.



202.0070.0 Nødåpner for PIN-lås

For opplåsing av skuffer ved bruk av elektronisk lås med PIN 202.0037.0 ved tomme batterier i ISO- eller funksjonsvogn. Krever en separat strømkilde, f.eks en USB-strømbank.

Hvis den elektriske låsen 202.0073.0 monteres på flere vogner i en bestilling, da er 1 stk. nødåpner 202.0070.0 tilstrekkelig.

varimed®

Tilbehør for funksjonsvogner og ISO-vogner



Modell nr.	Beskrivelse
202.0014.0	Forseglingsliste pulverlakkert vermilion stål- plate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for ISO-vogner med 1070 mm høyde (høyresidig montering).
202.0059.0	Forseglingsliste (par) pulverlakkert vermilion stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for ISO-vogner med 1070 mm høyde. (uten bilde)
202.0060.0	Forseglingsliste pulverlakkert vermilion stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for ISO-vogner med 850 mm høyde (høyre sidemontering). (uten bilde)
202.0061.0	Forseglingsliste (par) pulverlakkert vermilion stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for ISO-vogner med 850 mm høyde. (uten bilde)
202.0016.0	Sideskinne 460 mm lang, laget av aluminiumsprofil, 25 x 10 mm, effektiv bredde 410 mm, med 2 festestykker. Maks. lastekapasitet 20 kg.
202.0017.0	Dokumentholder 440 x 40 x 300 mm (B x D x H), SST 18/10. Effektiv bredde: 400 mm.





Modell nr. Beskrivelse

202.0012.0 Kurv
290 × 95 × 95 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker til å henge på tilbehørsskinnen.
Effektiv bredde: 215 mm.



202.0013.0 Kurv
460 × 150 × 150 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker til å henge på tilbehørsskinnen.
Effektiv bredde: 385 mm.



202.0039.0 Oppbevaringshylle
kan trekkes ut til siden, laget av HPL 400 × 385 mm, tykkelse 8 mm, bæreevne 12 kg, øker arbeidshøyden med 40 mm.
Kun for ISO-vogner med 720 mm bredde.



202.0041.0 Oppbevaringshylle
400 × 500 × 25 mm (B x D x H) laget av SST 18/10, nedfellbar, sikker arbeidsbelastning: 20 kg.
Kun for ISO-vogner med 720 mm bredde.



202.0055.0 Oppbevaringshylle
400 × 500 × 25 mm (B x D x H) laget av SST 18/10, nedfellbar, sikker arbeidsbelastning: 20 kg.
Kun for ISO-vogner med 720 mm bredde.


varimed®

Tilbehør for funksjonsvogner og ISO-vogner

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------


202.0018.0	Stativ for støttende tilbehør
-------------------	--------------------------------------

aluminium/plast, sidemontering til ISO-vogn, består av: 4 stk Basic festelementer (205.0100.0) 1 stk Hovedrør 1500 mm (205.0290.0) 1 stk Hovedrør 800 mm (205.0220.0) 2 stk Tilbehørsskiner (205.0022.0)
--

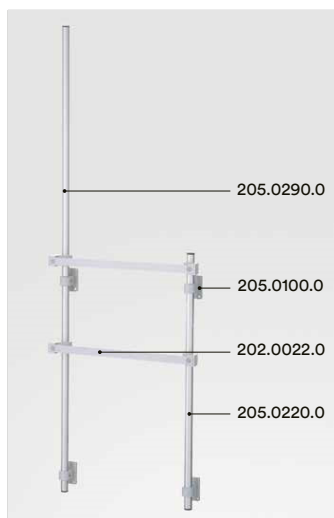


202.0021.0	Stativ for støttende tilbehør
-------------------	--------------------------------------

aluminium/plast, sidemontering til ISO-vogn, består av: 4 stk Basic festelementer (205.0100.0) 2 stk Hovedrør 900 mm (205.0230.0) 2 stk tilbehørsskiner (205.0022.0)

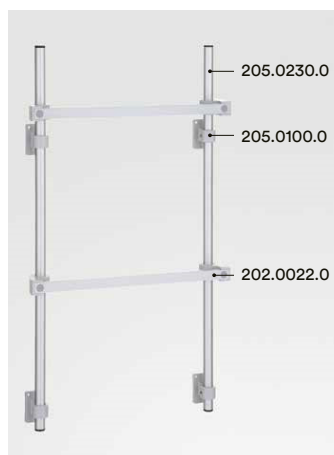

205.4100.0	Stativ for støttende tilbehør
-------------------	--------------------------------------

aluminium/plast, montert på baksiden av funksjonsvogner på 600 mm eller ISO-vogner på 720 mm bredde, består av: 4 stk Basic festelementer (205.0100.0) 2 stk Hovedrør 1500 mm (205.0290.0) 1 stk Tilbehørsskinne 25 x 10 x 510 mm (205.0500.0) (uten bilde)
--

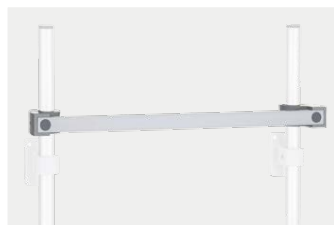

202.0022.0	Tilbehørsskinne 25 x 10 x 460 mm
-------------------	---

laget av anodisert aluminium, for montering av tilbehør, inkl. 2 klemmer 205.0600.0 for montering på stativet for støttetilbehør for sidemontering til ISO-vogn. Maks. lastekapasitet 20 kg. Effektiv bredde: 410 mm.



Modell nr. Beskrivelse

202.1610.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 730 × 240 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser, First-in/First-out system, med dobbel sett vattpindefukter og dispenser.



202.1640.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 600 × 200 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser, First-in/First-out system, uten tvillingsett.



202.1650.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 730 × 240 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser, Last-in/First-out system, med dobbel sett vattpindefukter og dispenser.



202.1660.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 600 × 200 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store bokser 202.0001.0 og 5 små bokser 202.0003.0, Last-in/First-out system, uten tvillingsett.

202.0007.0 Plastservant
 525 × 455 × 220 mm (B x D x H) med holder, for gipsbandasjevogn 260.1050.0.
 (uten bilde)

202.0008.0 Avfallsposeholder
 svivel-type, med 1 rull avfallsposer (48 stk) for gipsbandasjevogn 260.1050.0.
 (uten bilde)

Engangsartikler ikke inkludert.

varimed® Moduler for ISO-vogner

Modell nr. Beskrivelse



204.1260.0 Modul FlexModul
laget av ABS¹, grå, 600 × 400 × 50 mm (B x D x H) for skuffer med minimumshøyde 50 mm.



204.1270.0 Modul FlexModul
laget av PC², 600 × 400 × 50 mm (B x D x H) for skuffer med en minimumshøyde på 50 mm.

202.0028.0 Halvstørrelsesmodul FlexModul
laget av ABS¹, grå, 300 × 400 × 50 mm (B x D x H), for skuffer min. 50 mm høyde.
(uten bilde)

202.0046.0 Halvstørrelsesmodul FlexModul
laget av PC², 300 × 400 × 50 mm (B x D x H), for skuffer min. 50 mm høyde.
(uten bilde)



204.5210.0 FlexModul underdeler, tverrgående
laget av PC², 400 × 50 mm.



204.5360.0 FlexModul underdeler, langsgående
laget av PC², 600 × 50 mm.

202.0048.0 FlexModul underdeler, tverrgående
laget av PC², 300 × 50 mm, for halvstore ISO-moduler.
(uten bilde)



Modell nr. Beskrivelse

204.1310.0 Modul FlexModul
 laget av ABS¹, grå, 600 × 400 × 100 mm (B x D x H) for skuffer med minimumshøyde 100 mm.




204.1320.0 Modul FlexModul
 laget av PC², 600 × 400 × 100 mm (B x D x H) for skuffer med en minimumshøyde på 100 mm.




202.0029.0 Halvstørrelsesmodul
 FlexModullaget av ABS¹, grå, 300 × 400 × 100 mm (B x D x H), for skuffer min. 100 mm høyde.



202.0049.0 Halvstørrelsesmodul
 FlexModullaget av PC², 300 × 400 × 100 mm (B x D x H), for skuffer min. 100 mm høyde.

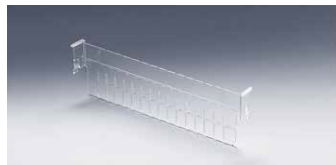

204.5260.0 FlexModul underdeler, tverrgående
 laget av PC², 400 × 100 mm.

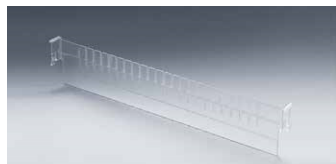

204.5410.0 FlexModul underdeler, langsgående
 laget av PC², 600 × 100 mm.

202.0051.0 FlexModul underdeler, tverrgående
 laget av PC, 300 × 100 mm, for halvstore ISO-moduler.
 (uten bilde)

varimed® Moduler for ISO-vogner

Modell nr. Beskrivelse



204.1360.0 Modul FlexModul
laget av ABS¹, grå, 600 × 400 × 200 mm (B x D x H) for skuffer med minimumshøyde 200 mm.



204.1370.0 Modul FlexModul
laget av PC², 600 × 400 × 200 mm (B x D x H) for skuffer med en minimumshøyde på 200 mm.

202.0031.0 Halvstørrelsesmodul FlexModul
laget av ABS¹, grå, 300 × 400 × 200 mm (B x D x H), for skuffer min. 200 mm høyde.
(uten bilde)

202.0052.0 Halvstørrelsesmodul FlexModul
laget av PC², 300 × 400 × 200 mm (B x D x H), for skuffer min. 200 mm høyde.
(uten bilde)



204.5310.0 FlexModul underdeler, tverrgående
laget av PC², 400 × 200 mm.



204.5460.0 FlexModul underdeler, langsgående
laget av PC², 600 × 200 mm.

202.0054.0 FlexModul underdeler, tverrgående
laget av PC², 300 × 200 mm, for halvstore ISO-moduler.
(uten bilde)

¹ **ABS akrylnitril-butadien-styren**

Materialeegenskaper: ripebestandig

Temperaturtoleranse: -30 °C til +85 °C

Kjemisk motstand: god motstand mot bensin, baser og smøremidler, delvis motstandsdyktig mot alkoholer og syrer



Modell nr.	Beskrivelse
202.0032.0	Støttestang for halvstore moduler Deler en skuff for ISO-moduler i full størrelse i en skuff for to halvstore ISO-moduler; kan ettermonteres.

202.0082.0	ABS skinnevegger Sett med ABS-skinnevegger, for ISO-vogner med 260.0037.0 og 260.0038.0. (uten bilde)
-------------------	--



202.0072.0	Stopper for ISO-moduler i full størrelse (par) For bruk med ISO-moduler i full størrelse i ISO-vogner med skinnevegger 260.0037.0 og 260.0038.0; holder hele modulen i to forskjellige vinkler når den trekkes ut. Modulen kan fylles eller tømmes uten å bli fjernet. Ett par stoppere er nødvendig for hver modul. Kan kun brukes med ISO-moduler fra SCHMITZ!
-------------------	---

²PC polykarbonat

Materialeegenskaper: ekstremt høy slagfasthet, høy stabilitet og temperaturbestandighet

Temperaturtoleranse: -90 °C til +125 °C

Temperaturmotstand: langsiktig maks. +125 °C, kortvarig maks. +140 °C

Kjemisk motstand: god motstand mot svake syrer, delvis motstandsdyktig mot alkoholer og smøremidler



varimed®

Funksjons- og ISO-vogner / IT-løsninger

De nye SCHMITZ IT-løsninger for funksjonsvogner og ISO-vogner – alltid fleksibel og banebrytende

Kombinerer kvalitet og innovasjon

SCHMITZ-kvaliteten du er vant til for funksjonsvogner og ISO-vogner, kombinert med innovative løsninger for dagens utfordringer. Dette er våre svar på den økende digitaliseringen i sykehus og praksis.

Allsidige løsninger som oppfyller dine behov

Velg mellom tre forskjellige IT-løsninger! To funksjonsvogner og en ISO-vogn konfigurert for hvert av følgende:

- Alt-i-ett PC
(med datamaskin integrert i skjermen)
- Innebygd PC
(klassisk løsning med separat datamaskin og skjerm)
- Laptop

For mer informasjon om komponentene for hver løsning og om funksjons- og ISO-vognmodellene som kan monteres med dem, se de følgende sidene.

Ingen grenser!

Våre funksjonsvogner og ISO-vogner kan også brukes normalt når de er utstyrt med en IT-løsning. Monitorbraketten er festet til baksiden av vognen, slik at den øvre overflaten er helt fri for bruk. Konfigurasjonen av skuffene kan også tilpasses dine behov.

Se også den to-siders illustrasjonen på side 44/45.

Viktig!

Alle følgende konfigurasjoner for IT løsninger involverer bare konfigurasjonen av en funksjons- eller ISO-vogn for å få plass IT-utstyr.

Ingen av skjermene, datamaskinene, batteriene eller annet IT-utstyr som er illustrert, følger med produktet.

varimed®

Funksjons- og ISO-vogner / IT-løsninger



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

260.0049.0	ISO-vogn (IT)
-------------------	----------------------

med 3 skuffer for moduler på maks. 50 mm høyde, 2 skuffer for moduler på maks. 100 mm høyde og 1 skuff for moduler på maks. 200 mm høyde.

4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, kulelager, hvorav 2 elektrisk ledende, 2 fullt låsbare hjul, og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med roterende veggavvisere, plast-topp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.

Med monteringsstang for montering av laptop eller skjerm.

Totalhøyde 1070 mm (uten skjermholder), chassissbredde 720 mm.

Moduler er ikke inkludert.




260.0043.0	Bandasje- og behandlingsvogn (IT)
-------------------	--

med 2 skuffer type 6B, 2 skuffer type 6D, 1 skuff type 6G. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, kulelager, hvorav 2 elektrisk ledende, 2 fullt låsbare hjul, og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med roterende veggavvisere, plast-topp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.

Med monteringsstang for montering av laptop eller skjerm.

Totalhøyde 1010 mm (uten skjermholder), chassis bredde 600 mm.

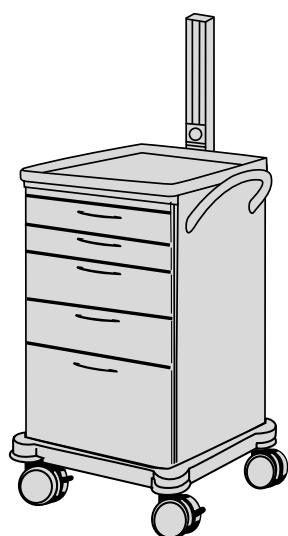

Modell nr.	Beskrivelse
260.0046.0	Bandasje- og behandlingsvogn (IT) med 2 skuffer type 4B, 2 skuffer type 4D, 1 skuff type 4G. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, kulelager, hvorav 2 elektrisk ledende, 2 fullt låsbare hjul, og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med roterende veggavvisere, plastt-opp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak. Med monteringsstang for montering av laptop eller skjerm. Totalhøyde 1010 mm (uten skjermholder), chassis bredde 450 mm.

Viktig!

Hver av de tre funksjonsvogner eller ISO-vognene på disse to sidene er konfigurert for installasjon av en IT-løsning. Omfanget av konfigurasjonen kan variere med valgt IT-løsning; se side 39.



Vognen skal være utstyrt med IT-utstyr installert av sluttbruker, din faghandelspartner eller en IT-tjenesteleverandør.



ISO-vogn (IT) 260.0043.0 med tilbehør 202.0079.0, 202.0062.0, 202.7560.1, 202.0020.0, 202.0076.0 og 202.3000.0

varimed®


Funksjons- og ISO-vogner / IT-løsninger

Modell nr.	Beskrivelse
	202.0078.0 Laptop-konfigurasjon Konfigurerer en funksjons- eller ISO-vogn for å romme en bærbar datamaskin. Inkluderer en monteringsstang for feste av braketten, festet på baksiden; brakett med lap-topskuff, høydejusteringsområde på ca. 230 mm, maksimal belastning 10 kg, tiltbar ca. 25°, med hull for tyverisikring, justerbar ca. 400 mm til høyre og venstre. Dimensjoner for laptopbrett: 400 mm x 288 mm. Passer for vognmodeller 260.0043.0, 260.0046.0 og 260.0049.0.
	202.0079.0 Alt-i-ett PC-konfigurasjon Inkluderer en skjermbrakett festet på baksiden. Maksimal belastning for skjermbrakett 11,3 kg, tiltbar, med VESA-standard 75 mm x 75 mm og 100 mm x 100 mm feste. Passer for vognmodeller 260.0043.0, 260.0046.0 og 260.0049.0.
	202.0080.0 Innebygd PC-konfigurasjon Inkluderer en skjermbrakett festet på baksiden. Maksimal belastning for skjermbrakett 11,3 kg, tiltbar, med VESA-standard 75 mm x 75 mm og 100 mm x 100 mm feste. Konfigurert for batteriholder under vognen. Passer for vognmodeller 260.0043.0, 260.0046.0 og 260.0049.0.

Fig. med 202.0062.0 og 202.0085.0

Merk:

Konfigurasjonen av den nederste skuffen på funksjons- eller ISO-vogn vil endres som følge av plassen som kreves for den innebygde PC-en. For ISO-vogner erstattes skuffen på 200 mm høyde med en skuff og et panel, hver på 100 mm høyde. For funksjonsvogner erstattes type G-skuffen med to type D-skuffer, hvor den nederste har redusert dybde.

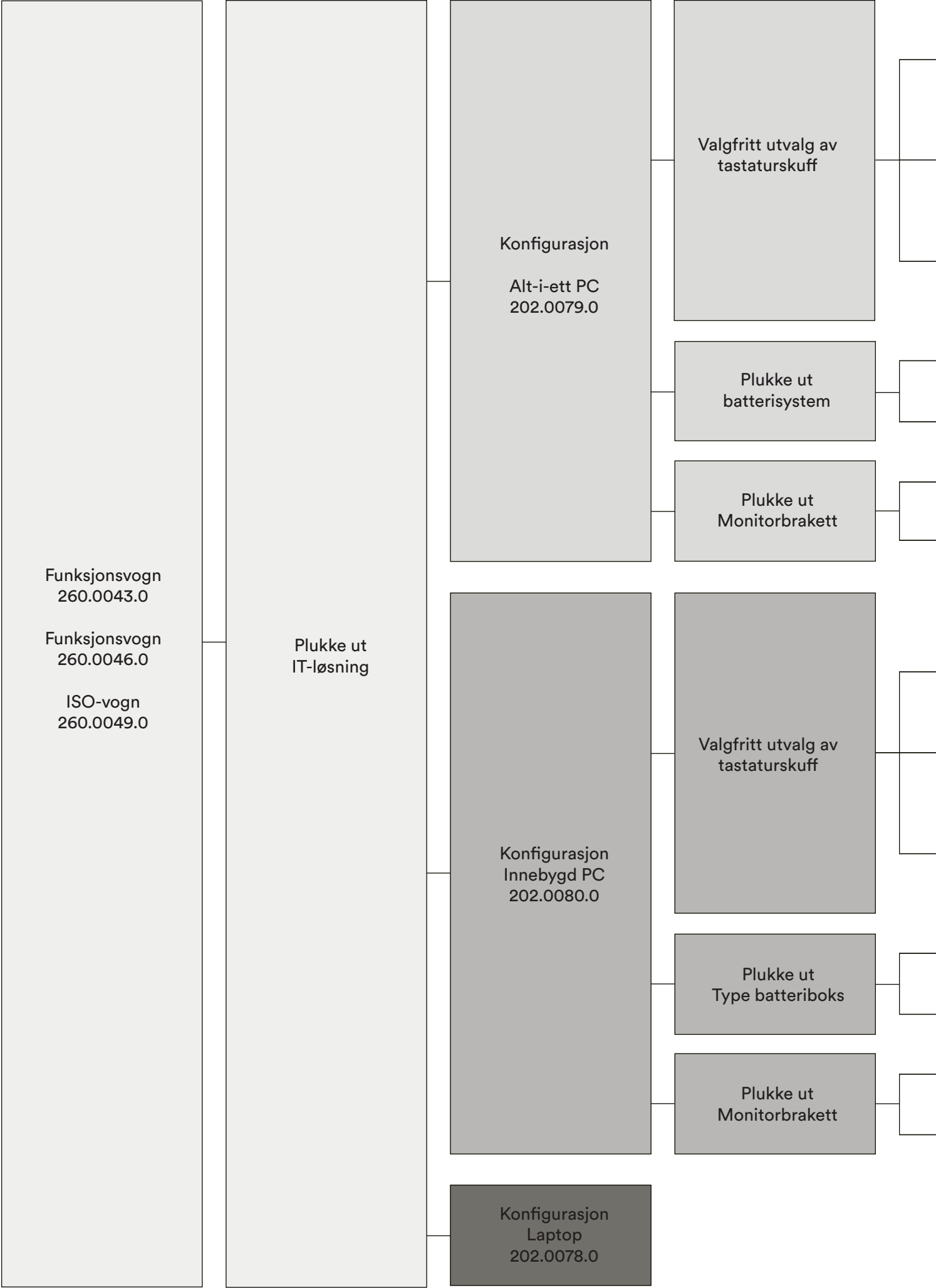

Enkel versjon 202.0083.0 202.0084.0
202.0085.0
(avhengig av vogntype, se varebeskrivelse)

ingen

Ergonomisk IT-skuff
202.0063.0 202.0074.0
202.0075.0
(avhengig av vogntype, se varebeskrivelse)

ingen

Plukke ut
Type batteriboks

202.0076.0 Batteriboks fra Lean

Integrert batteri

202.0081.0 Multibox batteriboks

Fast versjon (standard)

Høydejusterbar versjon 202.0062.0

Enkel versjon 202.0083.0 202.0084.0
202.0085.0
(avhengig av vogntype, se varebeskrivelse)

ingen

Komfortversjon 202.0063.0 202.0074.0
202.0075.0
(avhengig av vogntype, se varebeskrivelse)

202.0076.0 Batteriboks fra Lean

202.0081.0 Multibox batteriboks

Fast versjon (standard)

Høydejusterbar versjon 202.0062.0

varimed® Tilbehør til IT-løsninger

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.0062.0	Monitorbrakett, høydejusterbar
-------------------	---------------------------------------

Aluminium og plast, festet bak. Rekkevidde for høydejustering ca. 230 mm, brakett kan vippe 35° opp eller ned og svinges 35° til venstre eller høyre via kuleledd.

Braketten er designet for VESA standard 75 mm x 75 mm / 100 mm x 100 mm, maksimal lastekapasitet 15 kg.



202.0083.0	IT-skuff for ISO-vogn
-------------------	------------------------------

Passer i den øverste 50 mm skuffen i en ISO-vogn, med innsats for tastatur og kabelgjennomføring.



202.0084.0	IT-skuff for funksjonsvogn
-------------------	-----------------------------------

som IT-skuff 202.0083.0, passer men funksjonsvogner med 450 mm bredde.

(uten bilde)

202.0085.0	IT-skuff for funksjonsvogn
-------------------	-----------------------------------

som IT-skuff 202.0083.0, passer men funksjonsvogner med 600 mm bredde.

(uten bilde)



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.0063.0	Ergonomisk IT-skuff for ISO-vogn
-------------------	---

	Passer i den øverste 50 mm skuffen i en ISO-vogn, med høydejusterbar innsats for mus og tastatur. Tastaturet kan heves til nivå med skuffepanelet for ergonomisk bruk.
--	--

	Skuff sikret mot utilsiktet lukking.
--	--------------------------------------

202.0074.0	Ergonomisk IT-skuff for funksjonsvogn
-------------------	--

	som ergonomisk IT-skuff 202.0063.0, men passer til funksjonsvogner med 450 mm bredde, med sideuttrekkbar musebrett.
--	---

	(uten bilde)
--	--------------

202.0075.0	Ergonomisk IT-skuff for funksjonsvogn
-------------------	--

	som ergonomisk IT-skuff 202.0063.0, passer imidlertid funksjonsvogner med 600 mm bredde.
--	--

	(uten bilde)
--	--------------

202.0081.0	Multibox batteriboks
-------------------	-----------------------------


	Universal batteriholder; montert på undersiden av funksjons- eller ISO-vogn. Tilgjengelig plass for batterier på en 450 mm bred funksjonsvogn: 255 × 265 × 105 mm (B x D x H); for alle andre modeller: 335 × 265 × 105 mm (B x D x H).
--	---

	(uten bilde)
--	--------------




202.0076.0	Klargjøring til Batteriboks fra Lean
-------------------	---

	Plass til batterier fra Lean; montert på undersiden av funksjons- eller ISO-vogn.
--	---

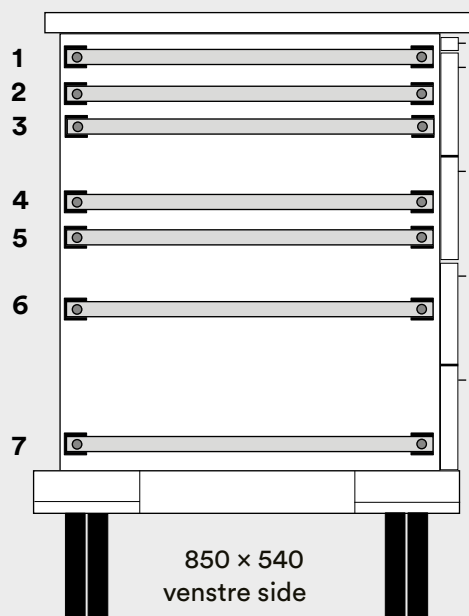


850 x 540
venstre side

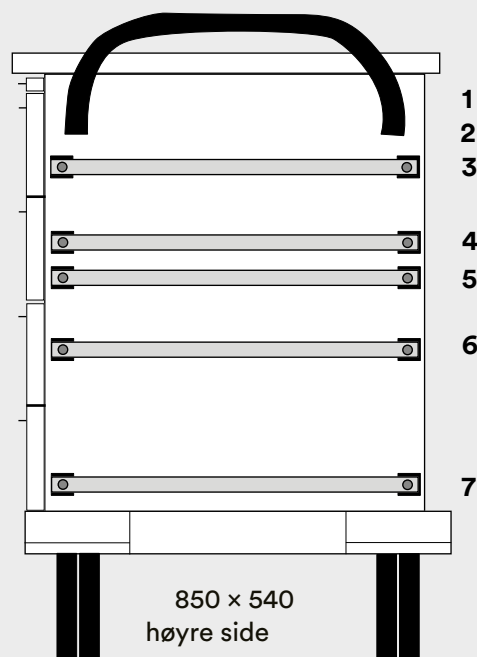


850 x 540
høyre side

Mulige posisjoner av sideskinner for vogner med 850 mm høyde

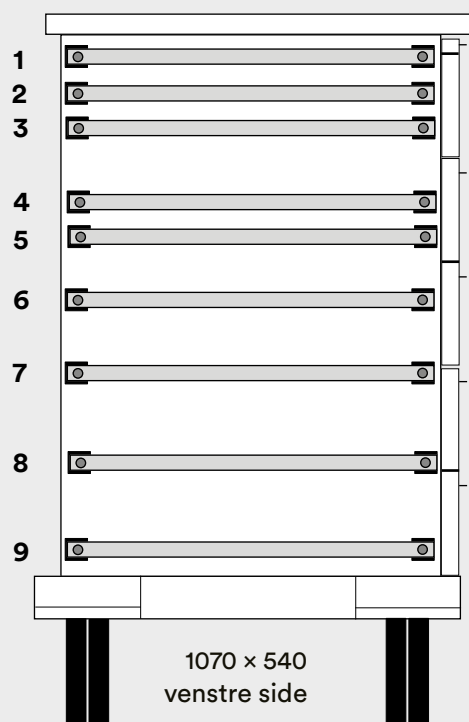


1070 x 540
venstre side

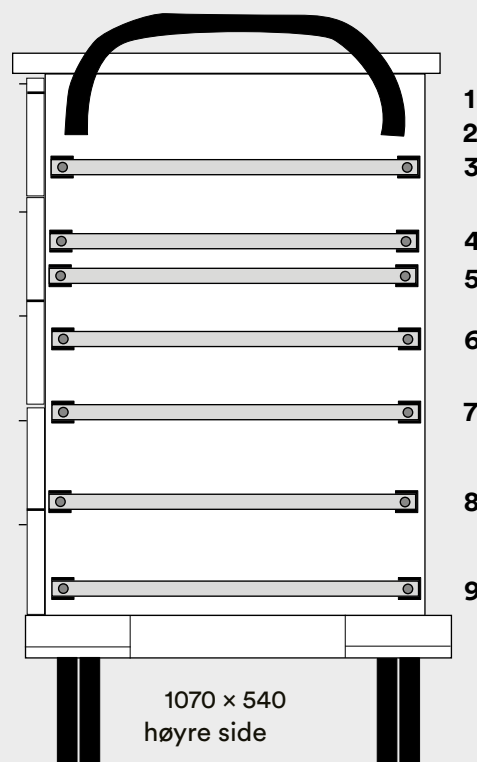


1070 x 540
høyre side

Mulige posisjoner av sideskinner for vogner med høyde 1 070 mm

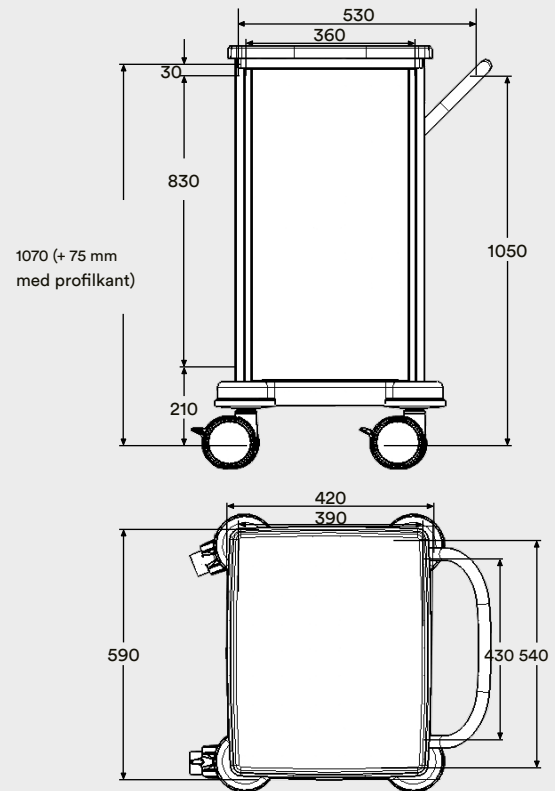


Vogner 360 mm brede, 540 mm dype

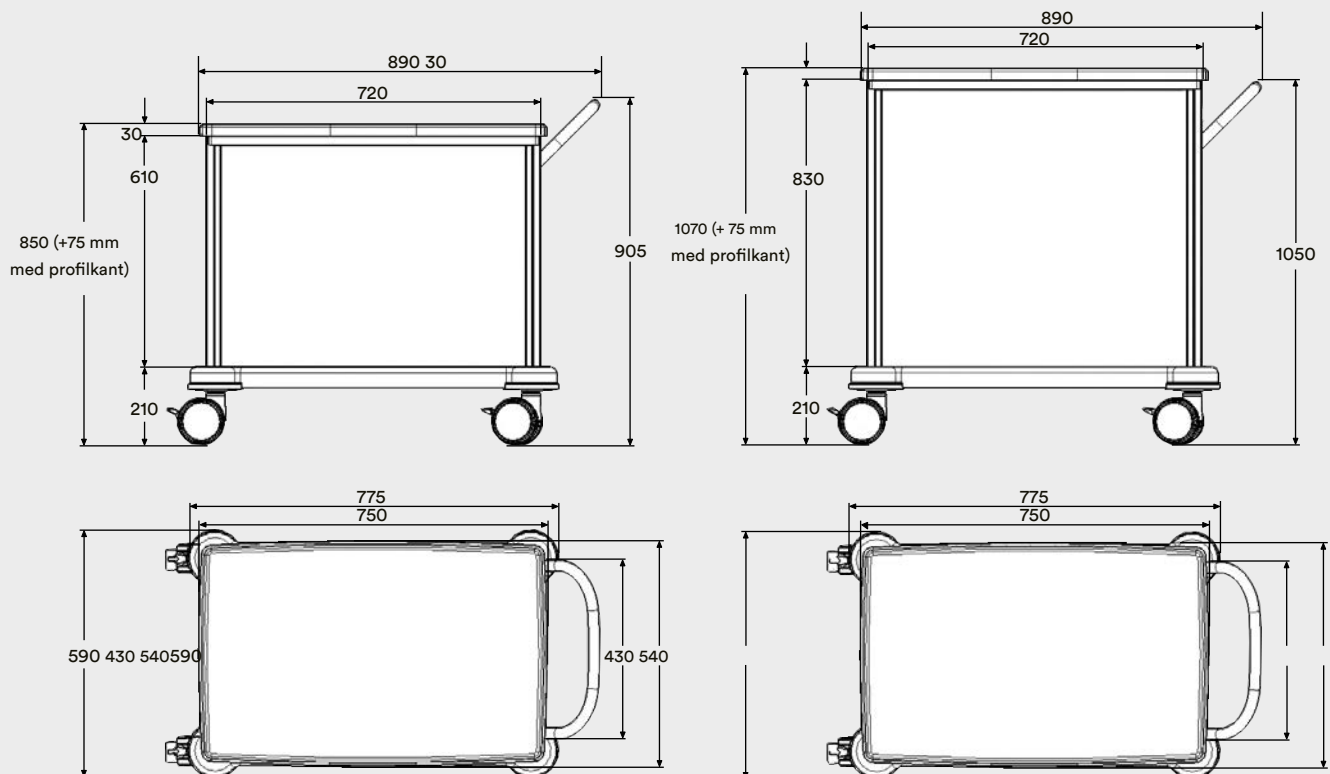


Vogner 720 mm brede, 540 mm dype



varimed® ISO-vogner Skuffer for ISO-moduler i full størrelse

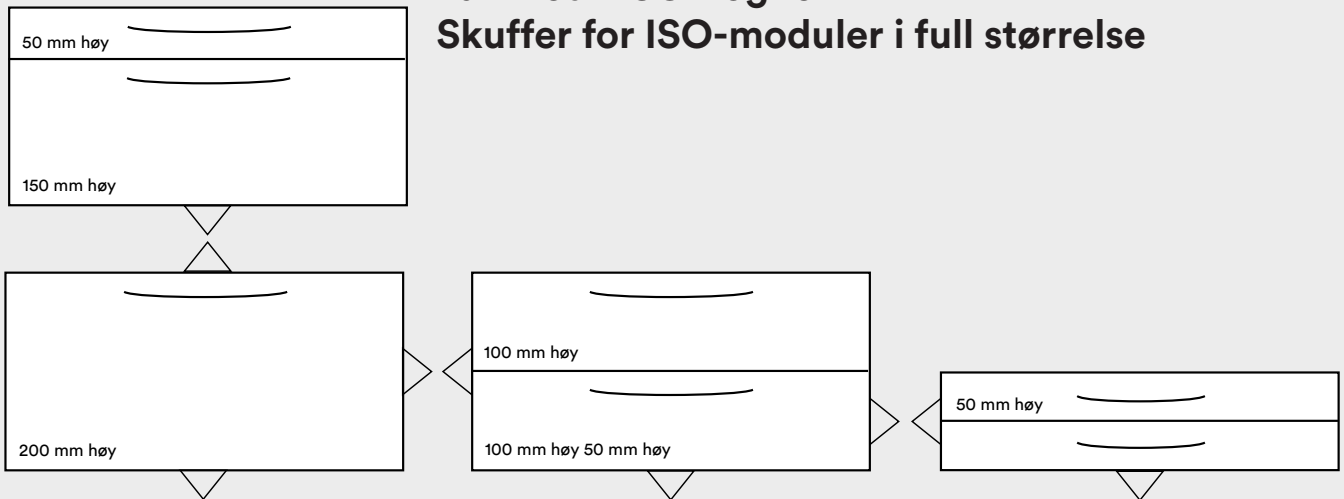


Skuffer for halvstore ISO-moduler

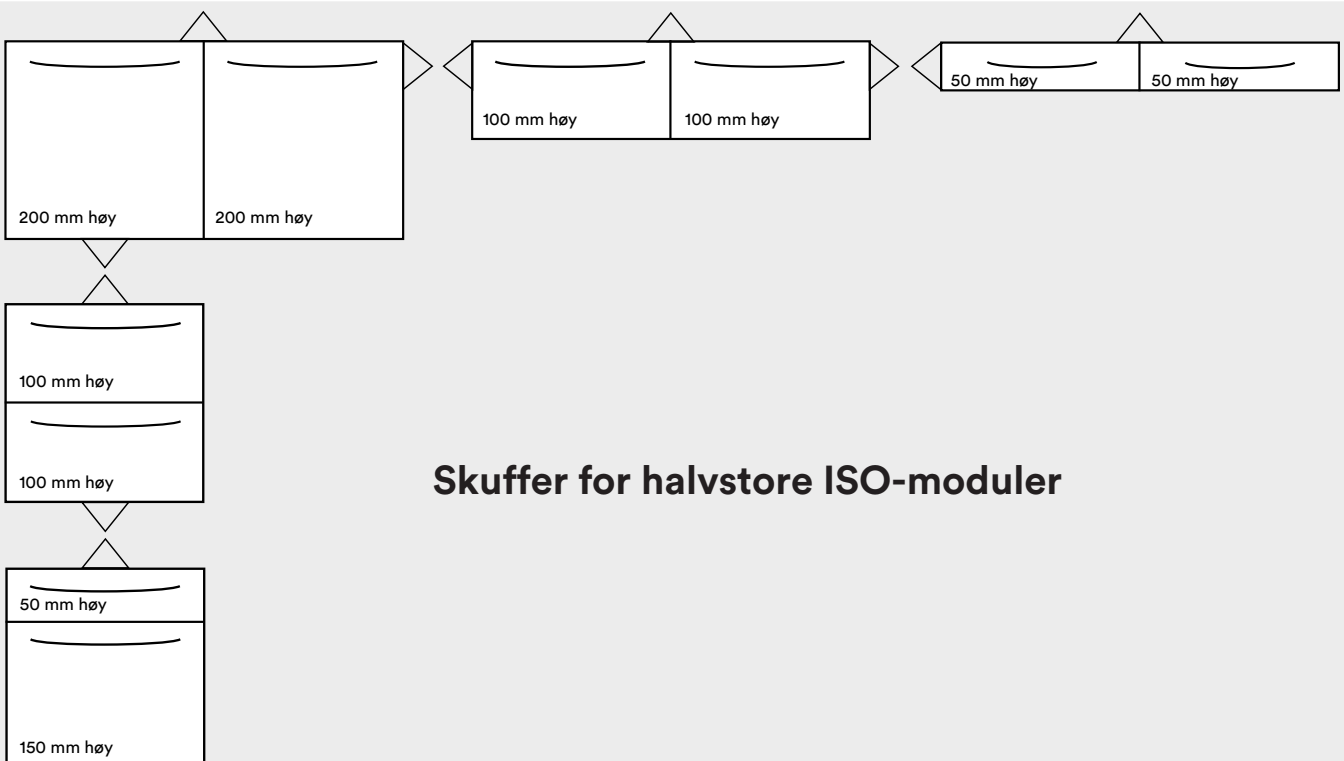

Skuffeoppsettalternativer for ISO-moduler i full størrelse og halvstørrelse

Prosentandel av reduksjon av MRSA og E.coli på en beskyttet overflate (ISO-22196:2011)

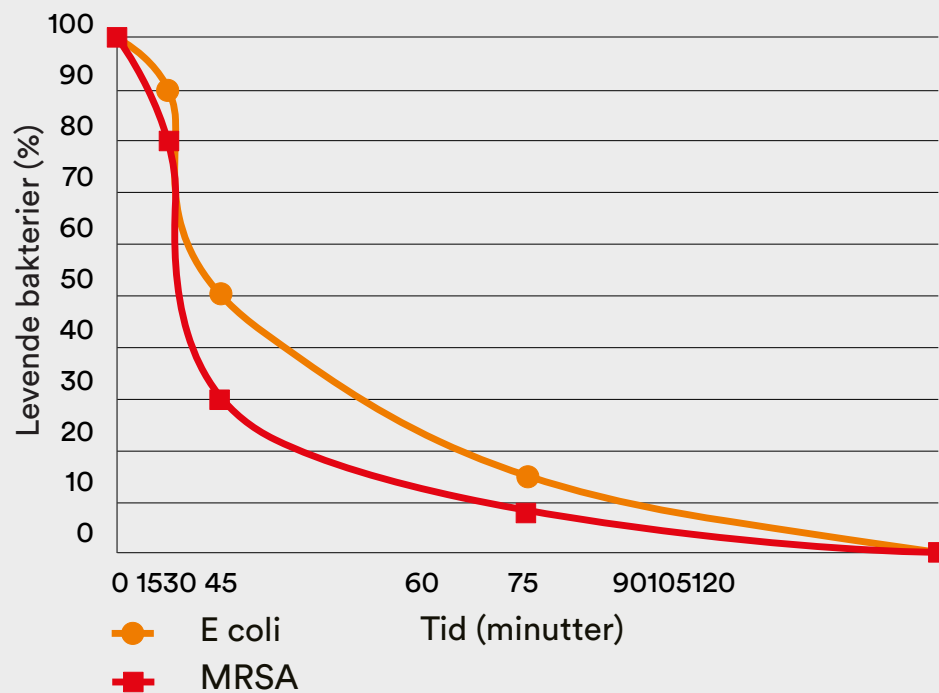

Mikrober har svært lang stabilitet på ubehandlede overflater:

Mikrobe	Varighet
MRSA	opptil 7 måneder
Salmonella	14 dager
Aspergillus Niger	sporer overlever i årevis
E coli	opptil 16 måneder

varimed® Funksjonsvogner og ISO-vogner Antimikrobiell belegg

Det antimikrobielle belegget sikrer effektiv og langvarig reduksjon av kolonisering av bakterier, mugg og sopp.

På grunn av det antimikrobielle belegget reduseres visse bakterier til opptil 80 % etter 15 minutter og opptil 99 % innen de første to timene.

Det hemmer veksten av et bredt spekter av mikroorganismer:

- MRSA
- E coli
- Salmonella
- Legionella
- Aspergillus Niger

Det antimikrobielle belegget er testet i henhold til ISO 22196:2011 for å underbygge reduksjonen av mikrober. Kun belegg med minimum reduksjon på 95 % er godkjent.

For mer informasjon, besøk www.biocote.com.

varimed® Funksjons- og ISO-vogner

Bestillingsinformasjon og materialbeskrivelse

Bestillingsinformasjon

Følgende informasjon kreves:

Bordplate:	Plast, sølvgrå med eller uten profilkant, innsatt SST 18/10 plate eller rustfri stålplate med eller uten profilkant. Standardversjon: se varebeskrivelse av den respektive vognen.
Vognchassis:	RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard) eller mot pristillegg iht. til fargekartet vårt.
Skuff og/eller dørfronter:	iht. til fargekartet vårt
Håndtak:	iht. til vårt fargekart eller mattforkrommet, halvsirkelformet eller kantet
Skyvehåndtak:	iht. til fargekartet vårt • rett eller buet versjon • montering på høyre eller venstre side • uten skyvehåndtak Standard versjon: buet skyvehåndtak montert på høyre side

Kabinett

Selvbærende sandwichkonstruksjon i helmetall, dobbelveggdesign, lyddempet, termisk beskyttelsesisolert, høy stivhet, glatte indre og ytre overflater.

Den totale lastekapasiteten (inkludert monteringsdeler) fordelt på tvers av en funksjons- eller ISO-vogn er 100 kg (60 kg for 360 mm eller 450 mm brede vogner).

Skuffer

Utskiftbare fronter laget av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplate, med avrundede hjørner og kanter, lyddempet og termisk beskyttelse med silikon tetningslist. Skuffer av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplate, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006. Skjulte støysvake skuffeglidere med full uttrekksfunksjon, automatisk inntrekksfunksjon og Airmatic-demping, høy holdekraft, verktøyfri skuffuttak.

Sikker arbeidsbelastning: 20 kg.

varimed® Funksjonsvogner

Modell- og materialinformasjon

En pristillegg påløper for skuffekonfigurasjoner som varierer fra vognene som er illustrert i denne katalogen. Dette tillegget beregnes én gang i henhold til den individuelt tilpassede skuffekonfigurasjonen; antall vogner i denne nye konfigurasjonen er irrelevant.

Dører

Laget av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplate, med avrundede hjørner og kanter, lyddempet og termisk beskyttelse med silikonforseglingsslist. Innvendige vidvinkelhengsler, 125° åpning, magnetlås.

Håndtak

Sinkstøpt, overflaten er kjemikaliebestandig, lett å rengjøre og lett å desinfisere. Monteringshull avstand 192 mm.

Bordplater

Skjøtefri bordplate av ABS, farge sølvgrå, med profilkant og eller 3-sidig gal-lerikant, underside forseglet, valgfritt i SST 18/10.

Sikker arbeidsbelastning: 50 kg.

Skyvehåndtak

Ergonomisk skyvehåndtak, pulverlakkert i henhold til fargekart.

Hjul

4 lukkede doble lettrullende hjul Ø 125 mm, kulelager, 2 elektrisk ledende hjul med full lås, 1 svingbaret hjul og 1 med retningslås, setter ikke riper i gulvet og er motstandsdyktig mot slitasje. Veggavvisere Ø 100 mm, ABS rammedeksel, farge sølvgrå.

Pulverlakkert finish

Høykvalitets flerlags glansmaling, ekstremt slitesterk og ripebestandig. Enkel å rengjøre.

Motstandsdyktig mot klimatiske forhold og desinfeksjonsmidler.

Standard finish for vognchassis:

gråhvit, RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.


Alle SCHMITZ-farger er tilgjengelige for dører, skuffefronter, skyvehåndtak samt håndtak på skuffer og dører, uten ekstra kostnad.

Ytterligere spesialpulverlakkerte overflater på forespørsel.

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

200.6030.0	Tillegg for overflatebehandling av vognchassis i henhold til SCHMITZ fargekart. (uten bilde)
-------------------	---

Fargekart Pulverlakkert finish

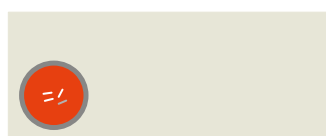

gråhvit
RAL 9002



hvit
RAL 9010



vannlilje hvit
RAL 0758510



lys saffron oransje
RAL 0608530



signalgul
RAL 1003



sinoberrød
RAL 2002



lotus rosa
RAL 3608510



tricot lilla hvit
RAL 3108510



tennis blå
RAL 2307020



lyse blå
RAL 2606030



safirblå
RAL 5003




blek blå
RAL 2308010



sitrongrønn
RAL 10080601



filigran grønn
RAL 1207020



iskald grønn
RAL 1209030



Skuffhåndtak også tilgjengelig
matt forkrommet.



hvit aluminium
RAL 9006



grå aluminium
RAL 9007



antrasittgrå
RAL 7016



Plastelementer
sølvgrå



Antimikrobiell
Disse fargene har antimikrobielle egenskaper

Fargekonfigurator

Oppdag nye, fargerike verdener

Med totalt 22 farger for pulverlakkert finish, har du mange muligheter for å skape fargerike høydepunkter i klinikken din.

Enten dempet eller munter, klassisk eller moderne, elegant eller ekstravagant – med vårt verktøy vil du helt sikkert finne riktig farge for deg på kort tid.

Vi vil gjerne gi deg råd – kontakt oss gjerne. Se kontaktinformasjon på baksiden.



Bli inspirert:

[Åpne fargekonfigurator](#)

Notater

[illegible]

Notater

[illegible]

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896

epost: firmapost@svas.no

webside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2024 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as